



NEW

TORNADO AND TORNADO^S

Quietly
powerful.

NEW

PROTECTIVE
SHIELD

¡La evolución de la Tornado no tiene límites!
Provista de un escudo protector.
Descubra toda nuestra experiencia
en la nueva turbina Tornado.

NEW
PROTECTIVE
SHIELD

4X
MÁS DURO

Las Tornado no son únicamente las turbinas Bien-Air más potentes, sino que ahora también son las más robustas.



The
shield
you
need.

Provistas de un verdadero escudo protector. El nuevo revestimiento **Protective Shield**, de última generación y totalmente resistente a los arañazos, es capaz de soportar los rigores del intensivo uso diario. Este escudo, aplicado mediante un tratamiento de PVD (Physical Vapor Deposition) de última generación, es único en el mercado. Esto le confiere una protección extrema frente a las agresiones externas.

SWISS  MADE



POTENCIA BAJO CONTROL.

Las Tornado son las turbinas más potentes de la marca gracias a la tecnología **Steady Torque**, que combina una distribución de la presión del aire con un caudal de escape óptimos.





MAYOR VIDA ÚTIL.

Los rodamientos de bolas cerámicas, resistentes al desgaste, garantizan una vida útil más prolongada. El rotor rediseñado y optimizado reduce sensiblemente el desgaste de la turbina.



MAYOR FIABILIDAD Y PRECISIÓN.

El mecanismo de accionamiento y de fijación **Accu-Chuck PreciPlus** garantizan una sujeción eficaz de la fresa. Las vibraciones se reducen notablemente, lo que le confiere a las Tornado una estabilidad y un confort sin igual en los trabajos odontológicos de mayor precisión.

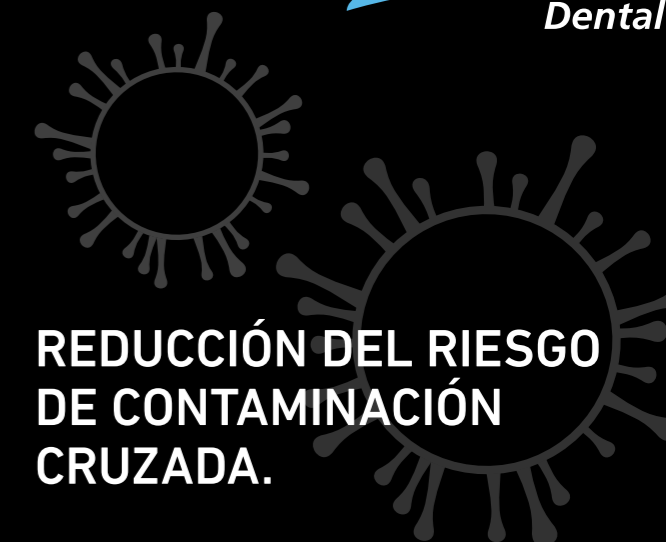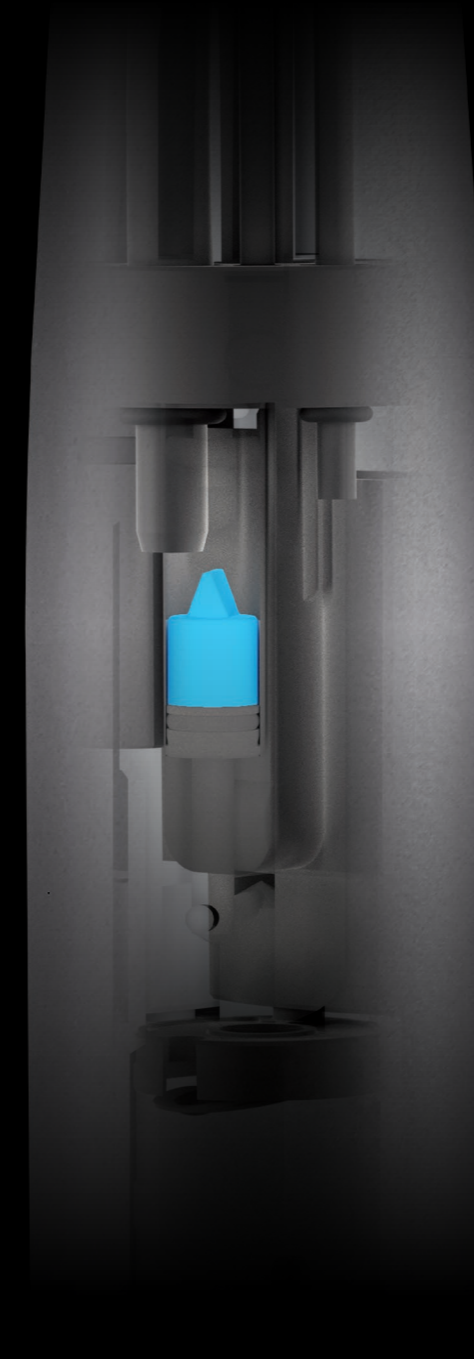

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.

Disminución de los riesgos de contaminación cruzada gracias a la válvula antirretorno y a la protección Sealed Head.


La válvula antirretorno reduce considerablemente el retorno de fluidos de la cavidad oral hacia los tubos del equipo. Además, el mecanismo de protección Sealed Head reduce el efecto de aspiración de fluidos en el cabezal del instrumento.

NEW DESIGN.

¡La evolución de la Tornado no tiene límites!
Un nuevo diseño optimizado que enaltece su mecanismo.



S W I S S  M A D E

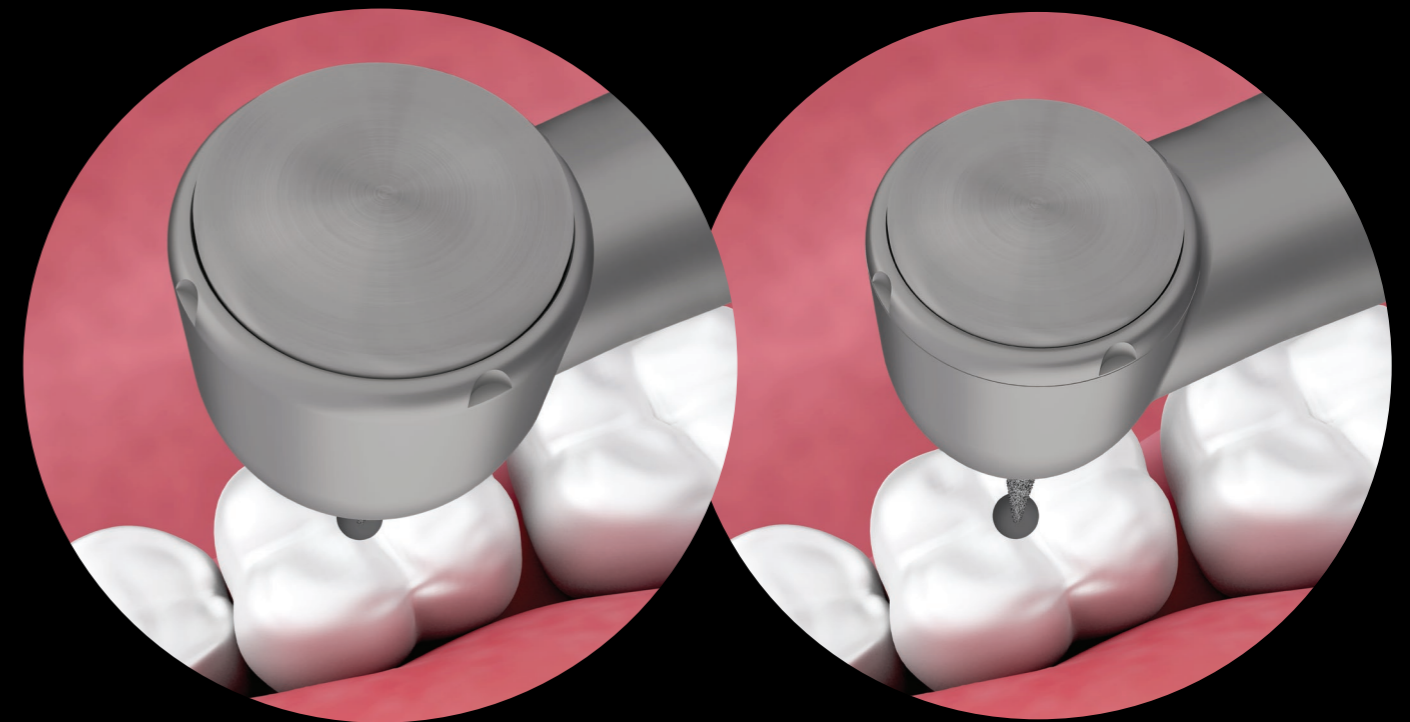

**¡ MÁS PEQUEÑO
MEJOR !**



ACCESO A LA BOCA

¿Busca mejorar el confort?
Gracias a su cabezal reducido, la Tornado^S aumenta el campo de visión y facilita el acceso a la parte posterior de la cavidad bucal. La Tornado^S se ha concebido especialmente para los procedimientos más complejos.

TORNADO

Protective Shield (tratamiento de PVD)

Más Potente - 30 Watt*

Más Silenciosa - 55 dBA


Dimensiones cabezal - Ø 12.2 mm H 13.1 mm

4 asimétricas combinadas sprays

Luz LED

2 años de garantía

Tornado LED 1600908-001
Tornado LK 1600907-001

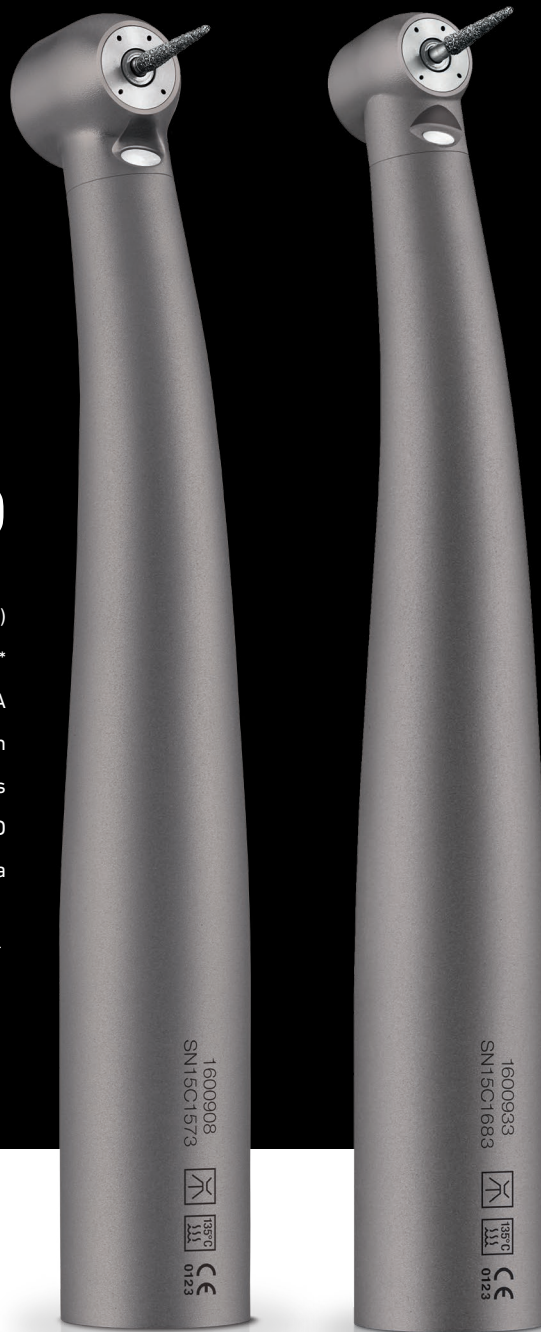

TORNADO^S

Protective Shield (tratamiento de PVD)

Más Potente -24 Watt*

Más Silenciosa - 58 dBA

Dimensiones cabezal - Ø 10.9 mm H 12.2 mm

4 asimétricas combinadas sprays

Luz LED

2 años de garantía

Tornado^S LED 1600933-001
Tornado^S LK 1600932-001

WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

Leer más



* 23 Watt (Tornado) / 20 Watt (Tornado^S) según la nueva norma ISO 14457: 2017.
Lasturbinas Tornado / Tornado^S pueden aplicar una potencia transitoria en la fresado 30 W / 24 W (durante al menos 1000 vueltas), cuando la fresa encuentra unobstáculo.