



**Textura de color verdadero, experto en diseño de PPR**

UP3D ESCÁNER DENTAL-UP560



# UP560

Precisión Ultra Alta  
6 micras

2X3MP HFR cámaras



## Sistema abierto

Formato STL, se puede importar al software de diseño exocad y 3Shape



## Escaneo de textura de color verdadero

Restaura la línea de lápiz en el modelo para el diseño PPR




## Escaneo de implante de arcada completa


No es necesario atornillar y desatornillar el pilar, escanee todos los pilares a la vez

## ESCANEADO DE TEXTURA EN COLOR VERDADERO PARA EL DISEÑO PPR

El software de diseño exocad y 3Shape reconoce fácilmente la línea de lápiz en el modelo de yeso, lo que reduce el tiempo de diseño y aumenta la precisión del PPR.

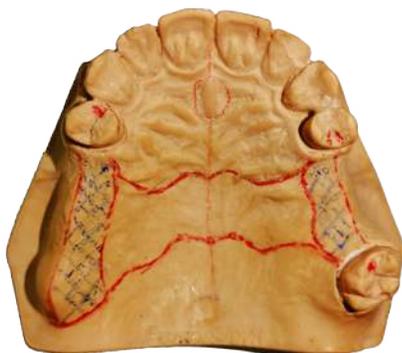

Modelo real

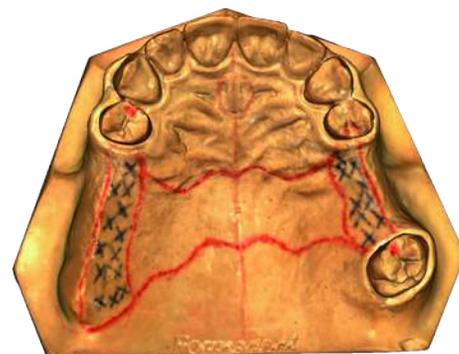

STL archivo




## Simplifica el proceso de PPR, digitaliza los laboratorios dentales con menor inversión

No es necesario seguir el proceso tradicional de producción paso a paso, reduciendo los errores y las tasas de reelaboración, maximizando la productividad y facilitando la transformación digital.



## Escaneo de 360° sin ángulo ciego para modelo e impresión no segmentados

Escanee el espacio interproximal de los dientes frontales sin ángulos ciegos y con una precisión de 6 micras para obtener más detalles.

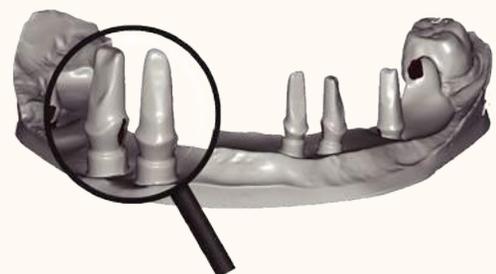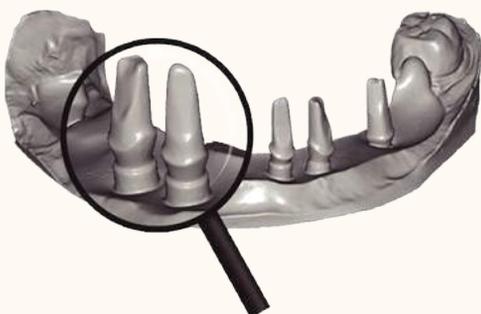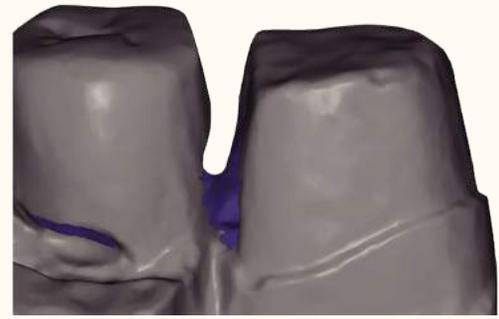

UP560 ESCÁNER

OTROS ESCÁNERES

## Parámetros

Modelo	<b>UP560</b>
Dimensión	355*310*550 mm
Peso	14kg
Cámaras	2x3.0mp
Precisión	< 6 micras
Proyector	Luz azul personalizada Escaneo multicolor
Interfaz	USB 3.0
Formatos	STL, UM, PLY, OBJ
Fuente de alimentación	AC110-240V, 50HZ
Estructura	Semi-abierto
Velocidad de escaneo	Arca completa: 15s Cubeta triple: 90s Todo-en-uno: 18s 12-unidad troqueles: 29s





**MEDICAL**  
TECH

La mejor opción para digitalizar su Laboratorio Dental

Contáctenos:

Telf: +506 4010-3335

WhatsApp: +506 7197-5960

info@medicaltech.pro

[www.medicaltech.pro](http://www.medicaltech.pro)